



Üdini tugev

everX Flow™
GC-It

Lühikese fiibriga
tugevdatud voolav
komposiit dentiini
asendusteks

GC

everX Flow GC-It

Üdini tugev


Avastage enda jaoks **everX Flow**, lühikese fiibriga tugevdatud voolav komposiit, millega asendada dentiini ja tugevdada restauratsioone. Järgides sama põhimõtet nagu raudbetoon ehituses, tugevdavad everX Flow klaaskiud restauratsioone ja hoiavad ära nende mõranemise.

everX Flow on lihtsasti kasutatav, saadaval kahes värvitoonis ja uskumatult tugev. Sellest saab kahtlemata teie uus **lemmikmaterjal nii tugevat hambakõnti vajavate restauratsioonide puhul** kui ka hambakõndi ülesehituseks.



Konkurentsitu **murdumistugevus** ulatuslike **vastupidavate** restauratsioonide jaoks.

Enamikul komposiitmaterjalidel on emaili asendamiseks ideaalsed omadused: kõrge kulumiskindlus ja esteetika. Samas ei ole need murdumisvastupanu aspektist dentiiniga võrreldavad materjalid. **everX Flow** sisaldab suurt kogust lühikesi kiude, mis on tugevalt vaiguga sidustatud ning mis on mõeldud ulatuslike tagahammaste restauratsioonide tugevdamiseks kombinatsioonis tavapärase emaili asendamiseks mõeldud komposiidiga.

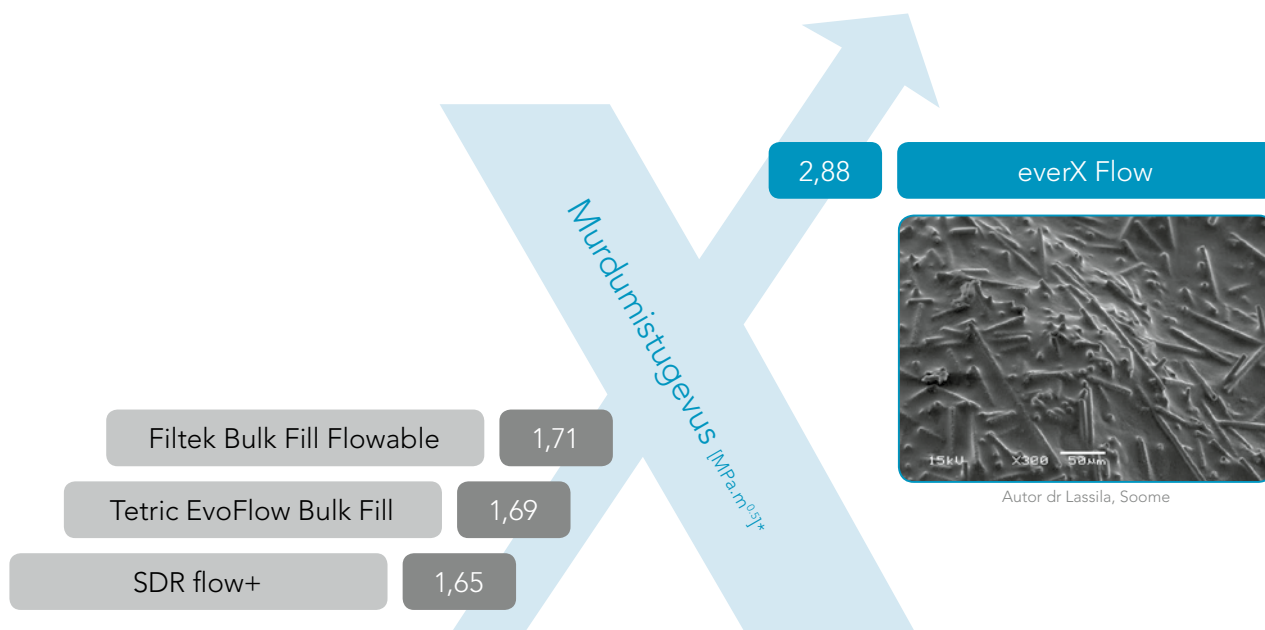

* Allikas: GCC R&D – olemasolevad andmed.
Test viidi läbi vastavalt standardile ASTM E399-90 (1997).


Ideaalne tiksotroopsus muudab kasutamise lihtsaks ja tagab suurepärase adaptiooni



Autor
Dr Javier Tapia Guadix, Hispaania

Tänu optimaalsele tiksotroopsusele **kohandub everX Flow lihtsalt** iga preparatsiooniga ja aitab **vältida poorsuse teket**.

Materjali kontrollitud voolavus võimaldab ühtlasi seda kasutada ka ülemiste molaaride puhul, **ilma et see ära voolaks**

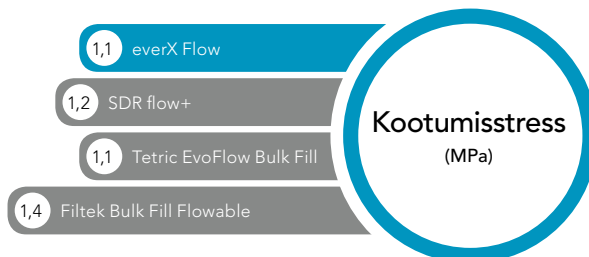

Allikas: GCC R&D – olemasolevad andmed.

Kaks tooni igaks olukorraks

Bulk värvitoon
Valgustamise sügavus 5.5 mm

Optimaalne **sügavate tagahammaste kaviteetide** puhul

Dentiini värvitoon
Valgustamise sügavus 2.0 mm

Optimaalne **esteetilisemateks tulemusteks ja hambakõndi ülesehituseks**

Sobib suurte kaviteetide tugevdamiseks ning aitab saavutada kauakestvad esteetilised tulemused



Kaviteedi preparatsioon



everX Flow aplitseerimine (Dentiini värvitoon)



Viimane kiht **Essentia** (Universal värvitoon)



Lõplik tulemus

Autor Georg Benjamin, Saksamaa



Kaviteedi preparatsioon



everX Flow aplitseerimine (Bulk värvitoon)



Viimane kiht **G-aenial Universal Injectable** iga (A3 värvitoon)



Lõplik tulemus

Autor dr Lucile Dahan, Prantsusmaa

everX Flow GC-It

Kaljukindel



**Bulk
värvitoon**
sügavatele
kaviteetidele

**Dentin
värvitoon**
esteetilisteks
tulemusteks



Prepareerige kaviteet



II klassi kaviteedi puhul ehitage
puuduvad seinad tavapärase
komposiitmaterjaliga



Täitke kaviteet **everX Flow**'ga



Lõpptulemus pärast katmist
tavapärase komposiitmaterjaliga

everX Flow

012898	everX Flow, Süstal 2 ml (3.7g) Bulk
012899	everX Flow, Süstal 2 ml (3.7g) Dentin

Veel avastamist



G-Premio BOND
Universaalne sidusaine



G-aenial Universal Injectable
Ülitugev süstitav restauratiivmaterjal



Essentia Universal
Universaalne pastakomposiit

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND ja G-aenial Universal Injectable on GC kaubamärgid.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ ja Tetric EvoFlow Bulk Fill pole GC kaubamärgid.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Nordic AB esindaja Eestis
Mob. +372 520 8718
Christine.Kuusmaa@gc.dental
www.gceurope.com