



Stiprs kā klints

G-ænia[®]
Universal
Injectable
no GC

Augstas izturības
kompozīts restaurācijām

GC

G-aenial® Universal Injectable no GC

Izbaudiet izcilu estētiku & noturīgu spīdumu!



Dr. Floriann Klumpp, Vācija



Dr. Ali Salehi, Francija

	Standarta krāsas											Iekšējās krāsas			Ārējās krāsas	
	XBW	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	CV	CVD	AO1	AO2	AO3	JE	AE
Šļirce 1mL (1,7g)	901471	901472	901473	901474	901475	901476	901477	901478	901479	901480	901481	901482	901483	901484	901485	901486



901503 - Pagarinātie uzgalīši (x30)



Iepazīstiet arī GC universālo adhezīvu G-Premio BOND:

- 009030 - G-Premio BOND komplekts 5mL
- 009036 - G-Premio BOND pudelīte 5mL
- 009032 - G-Premio BOND 3-paka, 3x5mL
- 009034 - G-Premio BOND unidozes, 50 gab.

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
 http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
 Latvijas birojs
 Ģertrūdes 113-73, Rīga
 Mob.tālr. +371 29405119
 info@nordic.gceurope.com
 www.gceurope.com





Stiprs kā klints


G-ænia[®]
Universal
Injectable
no GC

Augstas izturības
kompozīts restaurācijām


GC

Stiprs kā klints

Visām kavitātēm
Nav nepieciešams ārējais nosedzošais slānis

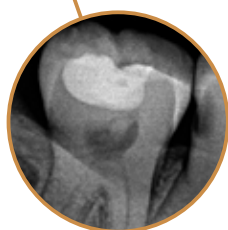

252% Al
rentgenkontrastainība
atvieglo vēlino
apsekošanu

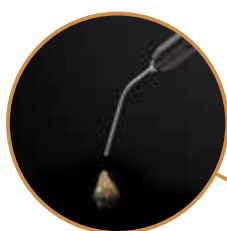

Perfekta plūstamība: bez
nekontrolētas materiāla tecēšanas
un ar vieglu atdalīšanos no
uzgališa snīpja



Lokāmi uzgališi ļauj sasniegt
ikvienu kavitāti




Nenotek: paliek tur,
kur aplicēts



Viegli izspiest
maksimālam
komfortam

Dr. Ahmed Al-Jaffr, Irāka

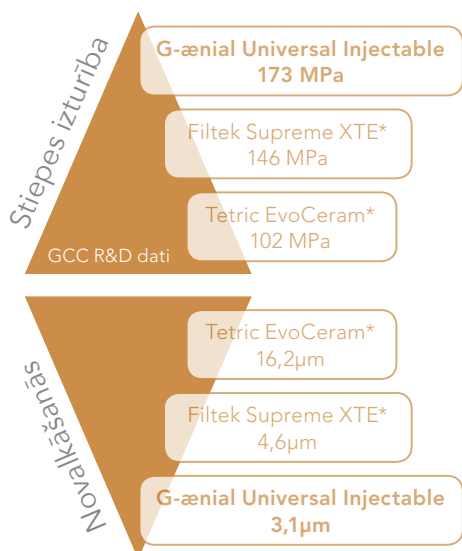

Ultra-smalkas bārija
pildvielas (150 nm)
& augsts pildvielu
saturs

Tehnoloģija, kas
nodrošina visu
pildvielu totālu
nosegšanu ar silānu
(Full-coverage Silane
Coating (FSC) Technology)
uzlabo pildvielu
dispersiju & adhēziju
ar matricu

Izcilas īpašības
Nav lipīgs
Zems izspiešanas
spiediens
Augsta
rentgenkontrastainība

*Nav GC tirdzniecības marka

Sāc injicēt!



II klases restaurācija



Sākotnējā situācija ar interpoksimālo kariesu



Vecās restaurācijas & kariozo masu izņemšana



Zem sevis ejošas vietas viegli sasniedzamas pateicoties lokāmam uzgalim



Proksimālās sienas atjaunošana ar emaljas krāsu JE



Matricas noņemšana pēc sienas atjaunošanas



Tagad veicama I klases restaurācija; dentīna slānis tiek atjaunots ar A4 krāsu



Gala slāņa aplikācija izmantojot emaljas krāsu JE




Pabeigta restaurācija pēc apstrādes un pulēšanas

Dr. Javier Tapia Guadix, Spānija

III klases restaurācija



III klases kavitātes

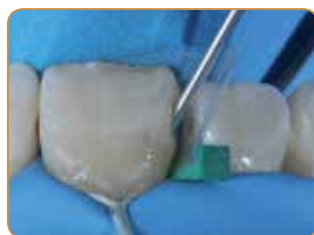

G-ænial Universal Injectable injekcija (A2)



Uzreiz pēc restaurācijas



Atkārtotā vizītē redzama perfekta restaurācijas integrācija

Dr. Ahmed Al-Jaff, Irāka

G-aenial® Universal Injectable no GC

Izbaudiet izcilu estētiku & noturīgu spīdumu!



Dr. Floriann Klumpp, Vācija



Dr. Ali Salehi, Francija

	Standarta krāsas											Iekšējās krāsas			Ārējās krāsas	
	XBW	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	CV	CVD	AO1	AO2	AO3	JE	AE
Šļirce 1mL (1,7g)	901471	901472	901473	901474	901475	901476	901477	901478	901479	901480	901481	901482	901483	901484	901485	901486



901503 - Pagarinātie uzgalīši (x30)



Iepazīstiet arī GC universālo adhezīvu G-Premio BOND:

- 009030 - G-Premio BOND komplekts 5mL
- 009036 - G-Premio BOND pudelīte 5mL
- 009032 - G-Premio BOND 3-paka, 3x5mL
- 009034 - G-Premio BOND unidozes, 50 gab.

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
 http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
 Latvijas birojs
 Ģertrūdes 113-73, Rīga
 Mob.tālr. +371 29405119
 info@nordic.gceurope.com
 www.gceurope.com

