



Lihtsam tee lõpliku restauratsioonini

TEMPSMART™ DC
GC-It

Kahelikõvastuv komposiit
ajutisteks kroonideks ja sildadeks

GC

TEMPSMART DC GC-It

Avastage tipptasemel innovatsioon:
tugev, kiire ja suurepärane!

Ajutised restauratsioonid on restauratiivses hambaravis üliolulised. Need ei kaitse üksnes prepareeritud hambaid, vaid on ka **mugavad ja esteetilised**, kuni patsient ootab lõplikku restauratsiooni. GC tõi turule uue tehnoloogiaga TEMPSMART DC, mis teeb ajutiste materjalide kasutuse nutikamaks. TEMPSMART DC on **esimene plastifikaatoritevaba kahelikõvastuv ajutine materjal, mis on loodud selleks, et teha hambaarsti töö lihtsamaks ja nauditavamaks.**


Valige TARGEM tee

TEMPSMART DC-d saab **valguskõvastada**, mis annab järgmised eelised: võimaldab kontrollida kõvastumishetke ja tagab parema lõpliku polümeriseerumise. See garanteerib **lihtsama ja tõhusama** protseduuri, **säästes teile aega**. Valguskõvastamine parandab ka ajutise restauratsiooni füüsikalisi omadusi, eriti paindetugevust.



Ekstraoraalne valguskõvastamine

TEMPSMART DC protseduurile kuluv aeg võrdluses konkurentidega (min)

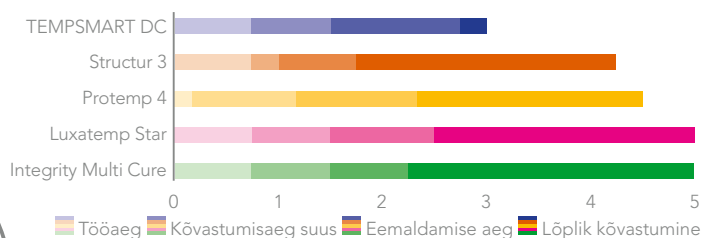


Allikas: GC R&D, Jaapan 2018, olemasolevad andmed.

Valige OHUTUM tee

Pikad polümeerahelad moodustavad **eriti tiheda polümeervõrgu**, millel on erakordselt suur **murdumistugevus**. Seetõttu sobib see ideaalselt pikemaajalisteks ajutisteks lahendusteks ja suuremateks sillatöödeks

Murdumistugevus võrdluses konkurentidega (MPa·m^{1/2})

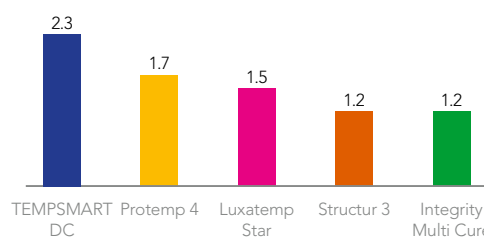

Allikas: GC R&D, Jaapan 2018, olemasolevad andmed.

Valige KERGEM tee

TEMPSMART DC on **1:1 pakendisüsteemis** ja see ei sisalda plastifikaatoreid. See tagab kõvade, **siledade, mittekleepuvate pindade** puhul suurepärase polümerisatsiooni ilma inhibitsioonikihita. Seeläbi tervenevad igemed kiiremini ja hambakattu on lihtne eemaldada.



Traditsioonilise plastifikaatoritega 10:1 (padrun vasakul) tulemuste võrdlus plastifikaatoriteta TEMPSMART DC-ga 1:1 (padrun paremal).



Suure murdumistugevuse tõttu on see ideaalne materjal tagahammaste sildade puhul

1. Esialgne olukord.
2. TEMPSMART DC aplitseerimine jäljendisse.
3. Jäljendi eemaldamine 2'00"-2'30" minutit pärast segamise alustamist. Valguskõvastamine 5 sekundit pinna kohta pärast üleliigse materjali eemaldamist.
4. Pärast poleerimist: silla tsementeerimine Freegenoli või Fuji TEMP LT-ga.



Autor dr. C. Lampson, Saksamaa

Tundke uhkust ÕNNELIKU patsiendi üle!

Mittekleepuv pind võimaldab saavutada ilusaid tulemusi vähese poleerimisega

1. Esialgne olukord.
2. Pärast TEMPSMART DC aplitseerimist ja suhu paigutamist eemaldatakse restauratsioon 2 minuti ja 30 sekundi jooksul ja valguskõvastatakse.
3. Restauratsiooni lõplik poleerimine käib lihtsalt.
4. Lõplik ajutine restauratsioon kõrgläikega.



Autor dr. J. Tapia Guadix, Hispaania

Valige ESTEETILISEM tee

TEMPSMART DC on saadaval **6 värvitoonis**, mis kõik sisaldavad **naturaalset fluorestsentsi**. Nutika täiteosakeste tehnoloogia tõttu on **poleerides võimalik lihtsalt** saavutada muljetavaldavalt **hea läige**.



Valige kõrgläike saavutamiseks käsitsi poleerimine kummidega või isikupärastamist võimaldav OPTIGLAZE color nanotäiteosakeste tugevdatud katematerjal.



TEMPSMART DC GC-It

Lihtsam tee lõpliku restauratsioonini

Valige TARGEM tee

Lühem protseduuriaeg tänu valguskõvastamise võimalusele



TEMPSMART DC, 48 ml padrun, 16 segamisotsikut						
Tellimiskood	12770	12771	12772	12773	12774	12775
Värvitoon	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

Valige OHUTUM tee

Suure murdumistugevusega pikaajalised ajutised restauratsioonid

Valige KERGEM tee

Mittekleepuvad restauratsioonid võimaldavad saavutada kõrgläiget väheste sammudega



TEMPSMART DC, 10 ml padrun, 10 segamisotsikut				
Tellimiskood	12776	12777	12778	12779
Värvitoon	A1	A2	A3	B1

Seotud tooted



Ümberbaseerimine

Unifast III



Parandus

G-aenial Universal Injectable



Isikupärastamine

OPTIGLAZE color



Ajutine tsementeerimine

FREEGENOL GC Fuji TEMP LT



Krooni eemaldaja

GC PLIERS

FREEGENOL, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color ja UNIFAST Trad on GC kaubamärgid. Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 ja Structur 3 ei ole GC kaubamärgid.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Nordic AB esindaja Eestis
Mob. +372 520 8718
Christine.Kuusmaa@gc.dental
www.gceurope.com

GC